

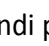


# Termometro IR per temperatura corporea

## Impostazione parametri

*Quando il termometro si trova in modalità stand-by, seguire le seguenti indicazioni per impostare i parametri*

1. Togliere le batterie, premere il pulsante ON/OFF un paio di volte per scaricare completamente la tensione residua nel suo circuito.
2. Tenere premuto il pulsante “” (senza rilasciarlo), inserire le batterie AA nel portabatterie, fare attenzione a non invertire la loro polarità(“+” o “-“). Il display si accenderà e apparirà la scritta “Err4”;
3. Rilasciare il pulsante “”, premere contemporaneamente i pulsanti “MODE” e “MEM”, sul display apparirà la scritta “CAAb”, premere il pulsante “MODE” una volta, sul display apparirà la scritta “CA45”, quindi premere il pulsante “”, il display non risulterà illuminato. Il termometro è entrato nella modalità calibrazione.
4. Quando il termometro si trova in modalità calibrazione, premere il pulsante “SCAN” per accenderlo, mantenere premuto il pulsante “MODE”, dopo 3 sec. il termometro entrerà in modo impostazioni nella posizione F1. Premere sequenzialmente il pulsante “MEM” per selezionare le altre impostazioni (F2.....F7)
5. I valori di default sono i seguenti:

F1	°C	Impostazione unità di misura temperatura in°C o in °F
F2	38.0	Impostazione l’allarme temperatura
F4	0.0	Impostazione valore di calibrazione temperatura (+ o -)
F5	On	Impostazione emissione segnale acustico (beep) una volta terminata la misurazione
F6	1	Seleziona la lingua (Inglese 1)
F7	169	Dato di default 169 (funzione al momento non disponibile)



**F1** Impostazione unità di misura temperatura °C o °F



**F2** Impostazione allarme temperatura



**F3** Impostazione valore di calibrazione temperature da effettuarsi con l'ausilio di un termometro standard



**F4** Impostazione emissione segnale acustico (beep) ON/OFF



**F7** Impostazione lingua (1 Inglese)



**F6** Impostazione 16.9 (parametro fisso)